
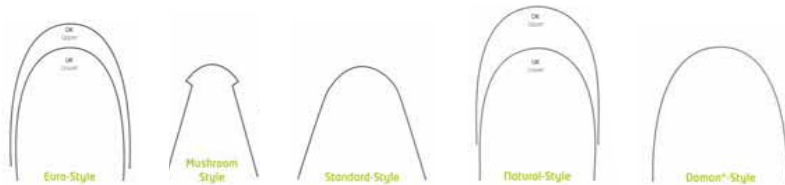


ORTHODONTIC WIRES MADE IN GERMANY

Η ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ

ROYAL SUPER ELASTIC NiTi WIRE NT...U/L

Τα τόξα Super Elastic NiTi Arch της Royal Orthodontics έχουν υπέροχο φινίρισμα που μειώνει την τριβή και το καθιστά για τον ασθενή πολύ άνετο. Είναι υψηλών προδιαγραφών πλήρως ωστενιτικά με υπερελαστικές ιδιότητες που τα κάνουν να μπορούν να μείνουν στο στόμα του ασθενούς μέχρι και για τρεις μήνες χωρίς να χάσουν το σχήμα τους. Με ένδειξη μέσης γραμμής στρογγυλά και τετράγωνα σε οικονομική συσκευασία των 25 τεμαχίων ή των 50 τεμαχίων.

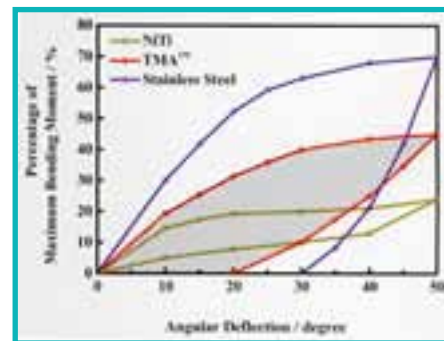

ROYAL WHITE NiTi WIRE NTW / NTWF

Αισθητικά Ορθοδοντικά σύρματα NiTi, ανωτέρας ποιότητας σε λευκό χρώμα των δοντιών. Διατίθενται σε μέγεθος στις διαστάσεις 012, 014, 016, 018, 16x16, 16x22, 17x25, 18x18, 18x25. Η πρωτοποριακή λευκή επικάλυψη στα στρογγυλά είναι παντού ενώ τα παραλληλόγραμμα διατίθενται σε δύο τύπους.


A. Με επικάλυψη σε όλες τις επιφάνειες και
B. με επικάλυψη μόνο προστομιακά, για ελαχιστοποίηση των τριβών.

Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.



ROYAL 3- Stepped-Force NiTi Arch Wire SF

Τα τόξα 3-Stepped-Force NiTi Arch της Royal Orthodontics ασκούν τρία διαφορετικά επίπεδα δυνάμεων στο οδοντικό τόξο. Στους γομφίους ασκείται η μεγαλύτερη δύναμη αρκετή για εύκολη μετακίνηση των τρίριζων γομφίων, στην περιοχή των προγομφίων μια ενδιάμεση δύναμη και στην πρόσθια περιοχή ελαφριές δυνάμεις για να μην καταπονούνται οι ευαίσθητες ρίζες των προσθίων δοντιών. Διατίθενται σε πακέτα των 10 τεμαχίων.

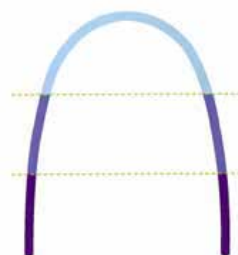


Thermoktiviert & leichte therapeutische Kraft :
Thermal Activated & Light Working Force
Intermediär & mittlere therapeutische Kraft:
Intermediate & Middle Working Force
Superelastisch & höhere therapeutische Kraft:
Super Elastic & Heavy Working Force

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ NATURAL. ΜΕ ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΦΟΡΜΕΣ: DAMON, MUSHROOM, STANDARD, EURO

ROYAL NEW THERMAL NiTi WIRE LIGHT FORCE NHNT

Τα Royal Σύρματα New Thermal NiTi της Royal Orthodontics είναι ιδανικά σαν σύρματα έναρξης θεραπείας σε πολύ συνωστισμένα περιστατικά. Οι υπερελαστικές ιδιότητες τους τα κάνουν να μπορούν να ενεργοποιηθούν μέχρι 120° (Deflection angle 120 degree). Ασκούν πολύ πιο ήπιες δυνάμεις και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα απλά θερμοελαστικά σύρματα. Στρογγυλά και τετράγωνα σε πακέτα των 10 τεμαχίων με ένδειξη μέσης γραμμής.

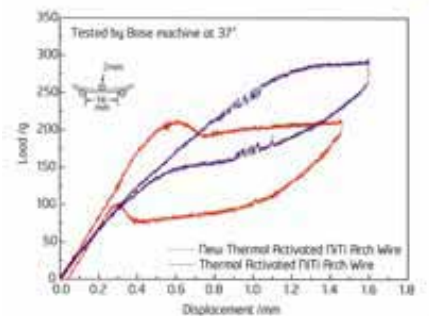

Το ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΡΜΑ ΣΕ
ΑΧΤΥΠΗΤΗ ΤΙΜΗ!

ROYAL ECONO THERMAL NiTi WIRE HNT


Τα υψηλών προδιαγραφών θερμοελαστικά σύρματα νικελίου τιτανίου της Royal Orthodontics Όταν ψυχθούν μπορούν να λάβουν οποιοδήποτε σχήμα και να προσδεθούν εύκολα ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο δόντι. Σε θερμοκρασία στόματος λαμβάνουν σταδιακά το αρχικό τους σχήμα, ευθυγραμμίζοντας τα δόντια ασκώντας ήπιες δυνάμεις. Στρογγυλά και τετράγωνα σε πακέτα των 10 τεμαχίων με ένδειξη μέσης γραμμής.

Μία χρήσιμη πληροφορία!!!

Βρέχετε μερικές μπατονέτες και τις βάζετε στην κατάψυξη. Όταν χρειάζεται να βάλετε το θερμοελαστικό σύρμα στο slot ενός πολύ απομονωμένου δοντιού πέρνετε μία μπατονέτα από την κατάψυξη και μαλακώνετε ψύχοντας το σύρμα τοπικά και το τοποθετείτε πανεύκολα στο slot.

ROYAL RCS WIRE ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΟΥ SREE RCS

Τα σύρματα νικελίου τιτανίου της Royal Orthodontics καμπύλης του Sree είναι υψηλών προδιαγραφών πλήρως ωστενιτικά με υπερελαστικές ιδιότητες και κατασκευάζονται στη Γερμανία σύμφωνα με τα υψηλότερα στάνταρντ. Η ανώτερης ποιότητας σχηματική μνήμη (shape memory) που έχουν και η εξαιρετική ελαστικότητα (Deflection angle 57 degree) τα κατατάσσει στα καλύτερα της αγοράς. Στρογγυλά και τετράγωνα σε πακέτα των 10 τεμαχίων με ένδειξη μέσης γραμμής.

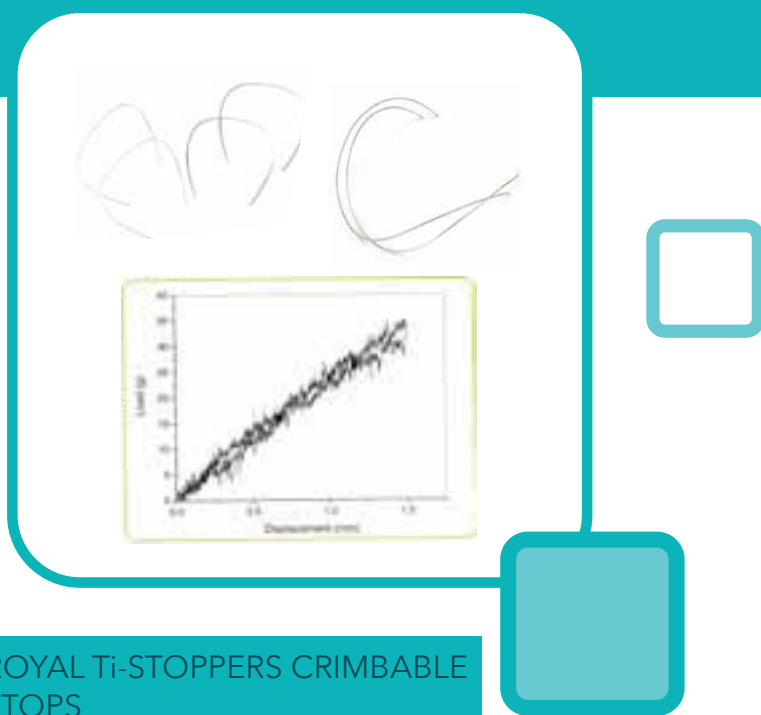

ROYAL 7x TWIST FLEX NiTi WIRE TW

Τα σύρματα 7x Twist Flex της Royal Orthodontics είναι επτάκλινα συρματα νικελίου τιτανίου και αποδίδουν πραγματικά τις χαμηλότερες ορθοδοντικές δυνάμεις από όλα τα σύρματα της αγοράς. Αν και έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να μην ξεδιπλώνονται, για ασφάλεια συστήνεται μετά από το κόψιμο η τοποθέτηση ενός Ti-Stopper. Διατίθενται σε πακέτα των 10 συρμάτων.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ NATURAL. ΜΕ ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΦΟΡΜΕΣ: DAMON, MUSHROOM, STANDARD, EURO

ROYAL Ti-STOPPERS CRIMBABLE STOPS

Εξαιρετικά μικρό μέγεθος που σφίγγονται πάνω στο τόξο ακόμη και με κοινή πένσα Weingard. Εμποδίζουν το σύρμα να γλιστράει ανάμεσα στα άγκιστρα. Εξαιρετικά σταθερά και εύκολα στην χρήση. Διατίθενται σε πακέτο των 20 τεμαχίων και σε δύο τύπους.

Type A για σύρματά από .012" έως .016" x .016".

TISTOPTU 1-2-3-4


Type B για σύρματά από .016" x .022" και άνω.

TISTOPCRA-B




ROYAL MULTI TMA Arch WIRE MTM

Τα σύρματα MULTI TMA της Royal Orthodontics είναι ένα επαναστατικό προϊόν και αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογικής έρευνας στον τομέα των συρμάτων. Παρουσιάζει μέχρι και 7 φορές υψηλότερη αντοχή στην καταπόνηση με εφελκυσμό. Έτσι έχει μια αξιοπρόσεκτη αντοχή σε σχέση με τα απλά σύρματα TMA. Με απλά λόγια κάμπτεται εύκολα και σπάει δύσκολα. Εξαιτίας της επικάλυψης της επιφάνειας του από κράμα νικελίου τιτανίου, έχει όλα τα πλεονεκτήματα αυτού. Δηλαδή μειωμένη τριβή και λαμπερό χρώμα. Στρογγυλά και τετράγωνα σε πακέτα των 10 τεμαχίων με ένδειξη μέσης γραμμής. Υπάρχουν και σε ευθεία μακριά τμήματα Conventional TMA σε πακέτα των 10 τεμαχίων.

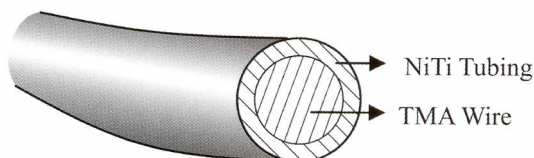

ROYAL DUAL ARCH WIRE SS(DSS) MULTI TMA(DMTMA)

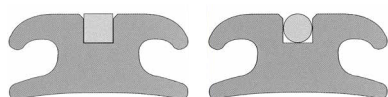

Αυτό το μοναδικό ορθοδοντικό σύρμα συνδυάζει το απόλυτο torque control στα μπροστινά δόντια με ελάχιστες τριβές στα πίσω. Διατίθεται σε NiTi, TMA, MULTI TMA & SS. Σε τρεις διαμέτρους και σε 4 αποστάσεις των προσθίων δοντιών. Ιδανικό για την γλωσσική ορθοδοντική αλλά και για τα αυτόδετα bracket. Σε συσκευασίες του 1 τεμαχίου.



	Anterior Size (square)	Anterior Length	Posterior Size
For .018 Slot	.018"x.018"	26mm	.018"
	.018"x.018"	28mm	.018"
	.018"x.018"	34mm	.018"
	.018"x.018"	38mm	.018"
For .022 Slot	.020"x.020"	26mm	.020"
	.020"x.020"	28mm	.020"
	.020"x.020"	34mm	.020"
	.020"x.020"	38mm	.020"
For .022 Slot	.022"x.022"	26mm	.022"
	.022"x.022"	28mm	.022"
	.022"x.022"	34mm	.022"
	.022"x.022"	38mm	.022"

ROYAL / MORELLI TMA WIRE STRAIGHT BETAS 560100

Ευθεία σύρματα TMA μήκους 36 cm και διαμέτρου 0,20" (0,5mm), 0,32" (0,8mm) και 0,36" (0,9mm). Ιδανικά για εργαστηριακή χρήση σε πακέτα των 10 τεμαχίων.



ROYAL TMA ARCH WIRE BETA

Τα σύρματα TMA της Royal Orthodontics κατασκευάζονται από ένα κράμα Beta Titanium χωρίς νικέλιο. Κάμπτονται εύκολα και έχουν εξαιρετικές ελαστικές ιδιότητες. Το τέλειο φινιρίσμα και η αντοχή τους τα κατατάσσουν στα καλύτερα της αγοράς. Στρογγυλά και τετράγωνα σε πακέτα των 10 τεμαχίων με ένδειξη μέσης γραμμής. Υπάρχουν και σε ευθεία μακριά τμήματα σε πακέτα των δέκα.

ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ NATURAL
Ή ΣΕ ΕΥΘΥΣ ΡΑΒΔΟΥΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ NATURAL. ΜΕ ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΦΟΡΜΕΣ: DAMON, MUSHROOM, STANDARD, EURO



ROYAL STAINLESS STEEL WIRES

SS

Τα σύρματα ανοξείδωτου χάλυβα της Royal Orthodontics είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα υψηλότερα τεχνολογικά κριτήρια από 304 V βαθμού ανοξείδωτο χάλυβα. Τα σύρματα είναι λεία και χωρίς torque ενώ μπορούν να ασκήσουν 390 γραμμ. δύναμη με μέγιστη ελαστική απόκλιση 26 βαθμών. Στρογγυλά και τετράγωνα σε πακέτα των 50 ή των 10 τεμαχίων με ένδειξη μέσης γραμμής σύμφωνα με τα στάνταρντ της FDA.




ROYAL WHITE SS WIRES

SSW

Αισθητικά Ορθοδοντικά σύρματα Stainless Steel, ανωτέρας ποιότητας στο χρώμα των δοντιών. Η πρωτοποριακή λευκή επικάλυψη στα στρογγυλά και στα παραλληλόγραμμα είναι παντού. Διατίθενται σε πακέτο των 10 τεμαχίων.



Wire Sizes multistrand
ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕΓΕΘΗ
Royal Round .0150",
.0175", .0190", .0215"
Moreli .015", .018",
.020", .032"

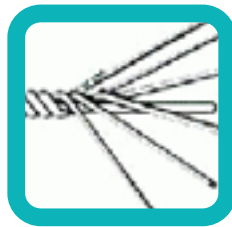

ROYAL / MORELLI ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ

SS

Διατίθενται σε ράβδους και σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

SEXTUPLETS SSTS

Τα sextuplets είναι εξάκλινα σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα.

TRIPLETS SSTT

Τα triplets είναι τρικλινα σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα.

SEPTLET SSTP

Τα septlet είναι επτάκλινα σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα.

TETRAPLETS Moreli 5504415

Τα tetraplets είναι τετράκλινα σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα.


TRIPLETS 5504315-32

Τα triplets είναι τρικλινα σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα.

LINGUAL RETAINER ROYAL ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ LINGRET...

Σε 5 μεγέθη από 22 - 30mm.

Τιμή LINGUAL RETAINER:

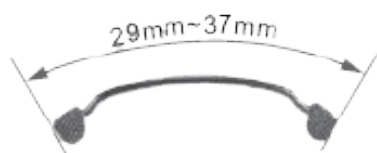

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ NATURAL. ΜΕ ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΦΟΡΜΕΣ: DAMON, MUSHROOM, STANDARD, EURO

UNIVERSAL LINGUAL RETAINER ROYAL LINGRET...

Σε 2 μεγέθη 2mm & 1,2mm.

Μήκος 58mm. Διατίθενται σε πακέτο των 2 τεμαχίων.

