

NEW BLUEDENT XPRESS ΚΟΛΛΗΣΤΕ ΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΜΟΝΟ ΣΕ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ!!!

up to 3500mW

00-009. Bluedent express cordless ortho - white, 200-006. Bluedent smartxpress ortho, 200-008b. Bluedent xpress cable - silver

1. ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LED module 3500mW!!!
2. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΟΣ
3. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
4. ΣΕ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ, ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ Η' ΜΕ ΓΩΝΙΑ 90° & ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΡΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 90°. ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ Η' ΑΣΥΡΜΑΤΑ.

Μήκος κύματος 450-490nm or 410-490nm

Τρεις τύποι λειτουργίας. HYPER 3 / 3500mW (3+3) sec / 1 sec. Pause

RAMP - 10/20 sec. - 4sec, soft start

HYPER ORTHO - 3 /3500mW (36) / 1 sec.pause

Ένταση φωτός HYPER ORTHO - up to 3500mW / sq.cm

RAMP -up to 1500mW/ sq.cm

Μέγεθος κεφαλής 14 x 16mm

Βάρος / Μήκος 165g / 215mm (ασύρματο)

150g / 225mm (ενσύρματο)

Power supply Li-Ion 3.7 V, 2400mAh (up to 4000 sec. Work, ασύρματο)

100-200 V AC / 12 V AC (ενσύρματο)



Μηχανήματα φωτοπολυμερισμού #βλ. σελ 36

ANTI-LASER GLASSES
PRGLASS.



FlashMax P3

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Με 4000-6000mW/cm²

* Το μόνο «έξυπνο» μηχάνημα με αυτοματοποιημένες λειτουργίες

* Με μοναδικό εργονομικό σχεδιασμό σε σχήμα στυλό, για να εφαρμόζει τέλεια ακόμα και σε λεπτά χέρια!!

* Λειτουργικότητα στο MAX 3, με κουμπιά λειτουργίας τόσο στην πάνω όσο και κάτω πλευρά. (Ενεργοποιείται τόσο με τον αντίχειρα όσο και με το δείκτη.)

* Προσαρμοζόμενη κεφαλή για καλύτερη προσέγγιση στο άγκιστρο.

* Κατασκευάζεται στη Δανία

FlashMax P3

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Με 4000-6000mW/cm²

Αρκούν μόνο 3 δευτερόλεπτα για να κολλήσει το άγκιστρο!

Ιδανικό στην έμμεση συγκόλληση άγκιστρων καθώς και στην γλωσσική τεχνική.

4000-6000mW/cm² στα 460nm+/- 20

Βάρος: 120gr

Διαστάσεις 225mm x 25mm

Χρόνος λειτουργίας 500 sec.

Χρόνος επαναφόρτισης 2 ώρες

2 Χρόνια εγγύηση!

FlashMax P3 460 4W
light curing pen

Mr. MATRIX MASTER

Aginate Mixer emF1

ROYAL ORTHODONTICS

NEA TIMH!



ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ

Ο πιο εύκολος τρόπος για άψογα αποτυπώματα
χωρίς φουσαλίδες!

www.orthoshop.gr

LED.C

Power input AC100V-240V 50Hz/60Hz
Light output 1000mW/cm² -1200mW/cm²
Net weight 120g
Dimensions Φ23mm × 263mm




LED.F

Power input AC100V-240V 50Hz/60Hz
Light output 1600mW/cm² -1800mW/cm²
850mW/cm² -1000mW/cm² (Optional)
Net weight 210g
Dimensions 195mm×40mm×150mm




LED.H ORTHO

Power input: AC100V-240V 50Hz/60Hz
Light output: 1000mW/cm² -1800mW/cm²
Net weight: 178g
Dimensions: Φ25mm×252mm

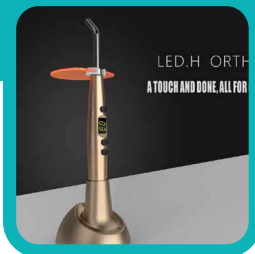

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ JET BRACKET jetbra

Το μηχάνημα Jet Bracket είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καθαρίζετε με αμμοβολή την βάση των ορθοδοντικών αγκιστρων (bracket). Καθαρίζει τέλεια τα γλωσσικά και τα αυτόδετα άγκιστρα προστατεύοντας ταυτόχρονα την ευαίσθητη επιφάνεια τους που έρχεται σε επαφή με το σύρμα καθώς και τον μηχανισμό αυτόδεσης. Εύκολο στην χρήση και πολύ μικρών διαστάσεων συνδέεται με το κομπρεσέρ.

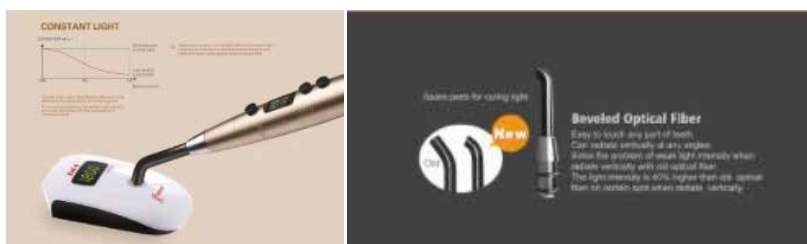

BIO-ART LUPE



Μεγεθυντικά γυαλιά εργασίας με μαλακή ζώνη. Προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε κεφάλι και είναι πολύ αναπαυτικά. Σε δύο τύπους με μεγέθυνση x 2,5 ή x 3,5 φορές.



Η τοποθέτηση γίνεται μόνο στο Νομό Αττικής από τον τεχνικό της εταιρείας μας και περιλαμβάνει όλα τα υλικά, εξαρτήματα & την εργασία για τοποθέτηση του μηχανήματος σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 2 μέτρων από το κομπρεσέρ. Για μεγαλύτερη απόσταση υπάρχει μία μικρή επιβάρυνση για εργασία και υλικά 5€ το τρέχον μέτρο.

BIOART MICRO ETCHER MBLAST

Εργαστηριακό μηχάνημα αμμοβολής προσαρμόζεται εύκολα στο Unit της οδοντιατρικής έδρας με αντάπτορα Midwest & Borden. Η με αντάπτορα για quick coupling σε καλώδιο αέρα από το κομπρεσέρ. Καθαρίζει & αδρανοποιεί μπράκετ, δακτυλίους και όλες τις οδοντικές επιφάνειες. Πωλείται με ένα ή δύο κλιβανιζόμενα άκρα, το ένα με γωνία 90 (μοιρών) και το δεύτερο με γωνία 138 (μοιρών) και τα δύο κατάλληλα για χρήση οξειδίου του αλουμινίου από 50 έως 90μm.

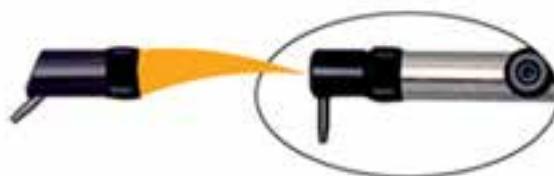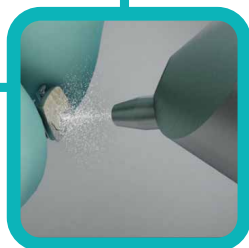

BIOCAMARA BIDCAM

Αμμοβολήστε χωρίς φόβο και χωρίς να λερώνετε τα πάντα. Διαθέτει ενσωματωμένη αναρρόφηση με σακουλάκι συλλογής του οξειδίου του αλουμινίου και μεγάλη διάφανη επιφάνεια για καλή οπτική.



ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ALOx90, ALOx50, ALOx120



ΑΚΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΖΟΛ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ AR-K, AR-R

Αμμοβολήστε χωρίς φόβο και χωρίς να λερώνετε τα πάντα. Συγκεντρώνει την αμμοβολή μόνο στο σημείο που θέλετε και ταυτόχρονα μέσω της αναρρόφησης απομακρύνει άμεσα όλα τα υπολείμματα των οξειδίων του αλουμινίου χωρίς να τα αναπνέει ο ασθενής ή να γεμίζουν το ιατρείο σας. Ταιριάζει εύκολα στη αμμοβολή **PROPHY JET** της **CAVITRON** αλλά και σε πολλές άλλες της αγοράς. Σε ΚΙΤ με συσκευασία 10 κυπελλάκια μιας χρήσης. και εξαρτήματα προσαρμογής καθώς και πακέτο επαναγεμίσιματος με 10 κυπελλάκια μιας χρήσης.



ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ

LED χαμηλής κατανάλωσης με ρυθμιστή έντασης φωτός σε μεγέθη μικρό A4 & μεγάλο A3.



Specifications: ItemX3-02
CCFL tube 5W x 2
Surface brightness 500~2500
Power supply 12Vdc\1A
Power consumption 10W
Lamp: 2.6, 420mm cold cathode fluorescent lamp
CCFL tube: 5 / 7W x 2
Tube life: 20,000hours minimum
Color temperature: 8,000K
View area: 420 x 300mm
Exterior size: 520 x 400 x 23mm
Frame material: ABS plastic frame
Frame color: white
Mounting type: Desktop, wall mount

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΜΗΤΗΡΑΣ WELDER

Ηλεκτρονικό μηχάνημα ηλεκτροσυγκόλλησης της Royal Orthodontics. Με τέσσερα ηλεκτρόδια και ηλεκτρονικό display για την ρύθμιση του χρόνου και της έντασης.



STRONG 207A / 107 MAX 35,000rpm STRONG207

Εργαστηριακό μοτέρ με εργαστηριακή ευθεία χειρολαβή πολύ υσχυρό 35000 στρ/λεπτό. Με ρυθμιστή ταχύτητας στο μοτέρ και στον ποδοδιακόπτη. Αριστερόστροφο & δεξιόστροφο για όλες τις πολιτικές πεποιθήσεις. Κατασκευασμένο στην Κορέα.



VH ESSENCE DENTAL TRIMMER

Ορθοδοντικό Τρίμμερ γύψου. Πολύ δυνατό, σύνδεση με παροχή νερού & αποχέτευση.



VH ESSENCE DENTAL ΔΟΝΗΤΗΣ ΓΥΨΟΥ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ VIBRAT



ΑΣ ΚΑΘΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ!

Το Magic Touch είναι μια αλληλεπιδραστική οθόνη αφής με συλλογή από παιχνίδια για παιδιά όλων των ηλικιών. Τοποθετήστε το στην αίθουσα αναμονής του ιατρείου σας και κάντε τα παιδιά να ξεχάσουν το φόβο τους ή την ανεία τους διασκεδάζοντας. Το πολύγλωσσο αυτό σύστημα multimedia αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα από 20 παιχνίδια δημιουργίας, αντίδρασης καθώς επίσης και λογικής σκέψης και είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 20 γλώσσες (συμπεριλαμβάνει και ελληνικά). Δεν περιλαμβάνει παιχνίδια βίας. Το παιχνίδι μπορεί εύκολα να κλείσει και να ανοίξει και προσαρμόζεται στην ηλικία των ασθενών πελατών σας. Η επιτοίχια συσκευή Magic Touch είναι διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα αλλά μπορεί και να διακοσμηθεί με λεπτά φύλλα HPL MDF μπροστά στο panel, σε μοτίβα όπως Ιππότης, Πειρατής ή Αιγυπτιακό μοτίβο. Μπορείτε επίσης εσείς να επιλέξετε ένα δικό σας μοτίβο, το οποίο μπορούμε εμείς να προσαρμόσουμε. Διαμορφώστε το όπως εσείς επιθυμείτε. Με ένα κάθισμα ή διπλό, χωρίς κάθισμα ή και με δύο οθόνες μπρος πίσω. Ακόμα, μπορείτε να παραγγείλετε και σκέτη οθόνη ή οθόνη με σχήμα ζώου, όπως ελέφαντα, λιονταριού, χελώνας, αρκούδας κ.α.



Το Magic Touch είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε η ηλεκτρική σύνδεση να είναι ελεγχόμενη και να κρατά μακριά τα παιδιά από καλώδια και πρίζες. Η 17" TFT οθόνη αφής είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να μη γρατζουνιέται και να είναι αδιάβροχη. Μπορεί να καθαριστεί με οτιδήποτε ακόμη και με αλκοολούχο προϊόν, δεν παθαίνει τίποτα. Για την οθόνη αφής χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας υλικά έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η ασφάλεια των παιδιών που έρχονται σε επαφή με τη συσκευή. Παρέχεται 2 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μοντέλα, για το σύστημα και για την οθόνη. Τα παιχνίδια είναι χωρίς δικαιώματα. Οι μικροί σας ασθενείς θα ξετρελαθούν.

M1 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

1. Διαστάσεις: Μήκος:530 Πλάτος:490
Υψος:800mm
2. Δομή κατασκευασμένη από χάλυβα, ιδιαίτερα ανθεκτική
3. Διαθέτει 5 συρτάρια και επιφάνεια από γυαλί, , αντι-χημική, και ιδιαίτερα ανθεκτική και είναι πολύ εύκολο στο να καθαρίσει το κάθε συρτάρι
4. Είναι ιδιαίτερα βολικό κατά την κίνησή του κινητός καθώς του αλλάζουμε θέση
5. Διατίθεται σε αρκετά διαφορετικά χρώματα γυαλιού



M2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

1. Διαστάσεις: Μήκος:530 / Πλάτος:490 / Υψος:800mm
2. Δομή κατασκευασμένη από χάλυβα, ιδιαίτερα ανθεκτική
3. Διαθέτει 4 συρτάρια και επιφάνεια από γυαλί, , αντι-χημική, και ιδιαίτερα ανθεκτική και είναι πολύ εύκολο στο να καθαρίσει το κάθε συρτάρι
4. Είναι ιδιαίτερα βολικό κατά την κίνησή του κινητός καθώς του αλλάζουμε θέση
5. Διατίθεται σε αρκετά διαφορετικά χρώματα γυαλιού



M3 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

1. Διαστάσεις: Μήκος:530 / Πλάτος:490 / Υψος:800mm
2. Δομή κατασκευασμένη από χάλυβα, ιδιαίτερα ανθεκτική
3. Διαθέτει 5 συρτάρια διαφορετικού μεγέθους και επιφάνεια από γυαλί, , αντι-χημική και ιδιαίτερα ανθεκτική και είναι πολύ εύκολο στο να καθαρίσει το κάθε συρτάρι
4. Είναι ιδιαίτερα βολικό κατά την κίνησή του καθώς του αλλάζουμε θέση
5. Διατίθεται σε αρκετά διαφορετικά χρώματα γυαλιού



M1 JPS-66 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ UNIT

1. Διαθέτει πέντε συρτάρια.
2. Επιφάνεια ανθεκτική στα χτυπήματα και στα χημικά.
3. Υψηλής ποιότητας μηχανισμούς
4. επίπεδο Unit.
5. Αυτόματος έλεγχος των χαμηλών και υψηλών χειρολαβών,
6. Αεरोδρoσύριγγα.
7. Αναρόφηση με σιελαντλία
8. Αυτόνομη τροφοδοσία νερού μέσω φιάλης.
9. Ποδοδιακόπτη.
10. Μανόμετρο πίεσης.
11. Ησχυρό κομπρεσέρ χωρίς λάδι.



D Y N A M I C

Σχεδιασμένη από την
Ολλανδική εταιρεία
Φυσιοθεραπευτών



Το κάθισμα Dynamic είναι ένα εργονομικό εξάρτημα για τον οδοντίατρο-ορθοδοντικό που είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καταπολεμά αλλά και να αποτρέπει την εμφάνιση ενοχλήσεων από τη ράχη. Έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί από ειδικούς φυσιοθεραπευτές σε συνεργασία με το RUAC (σχολή και συμβουλευτικό κέντρο για τα προβλήματα της ράχης) που βρίσκεται στη Χάγη-Ολλανδία. Στο κάθισμα Dynamic οι δύο θέσεις καθίσματος είναι συνδεδεμένες με έναν μηχανισμό μεταβατικού τύπου. Όταν βρίσκεται στην ενεργητική θέση το κάθισμα εμφανίζει μια θετική κλίση 3 μοιρών. με αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερο για τη σπονδυλική στήλη να έρθει στη θέση της λόρδωσης (η θέση που κουράζει ελάχιστα τη ράχη). Όταν το κέντρο βάρους μετακινηθεί ελαφρά προς τα πίσω, το κάθισμα εμφανίζει μια κλίση 6 μοιρών προς τα πίσω. Ταυτόχρονα, η οσφυϊκή στήριξη αυτόματα μετατοπίζεται προς τα εμπρός και έτσι εξασφαλίζεται η θέση της λόρδωσης και στο παθητικό κάθισμα. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται η τάση στη ράχη και στις δυο θέσεις. Η υποστήριξη στην οσφυϊκή χώρα σημαίνει ότι η σπονδυλική στήλη μπορεί να πάρει ένα σχήμα που πλησιάζει στο μέγιστο βαθμό στην ανατομική της κάμψη. Χωρίς οσφυϊκή υποστήριξη (όπως όταν καθόμαστε σε ένα συμβατικό κάθισμα εργασίας) η λεκάνη έρχεται προς τα πίσω, η σπονδυλική παίρνει ένα σχήμα C και ο κορμός έχει μικρότερη σταθερότητα. Η έξυπνη σχεδίαση της οσφυϊκής υποστήριξης στο κάθισμα Dynamic εγγυάται την ακριβέστερη τμηματική διαμόρφωση του οσφυϊκού τμήματος της σπονδυλικής στήλης σε σχήμα S που είναι και το φυσιολογικό. Το μικρότερο μέγεθος της οσφυϊκής υποστήριξης εξασφαλίζει μια ιδανική ελευθερία κινήσεων και ενεργοποιεί τη διαδικασία της φυσιολογικής τάσης στη σπονδυλική στήλη.